

FIXEYE +



DĚKUJEME ZA ZAKOUPENÍ
FIXEYE+

Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

POPIS PRODUKTU

Hlavní funkce

Fototerapie červeným LED světlem



Optimální rozsah červeného LED světla o 660 nm pomáhá stimulovat kolagen a zlepšovat oxyskylaci tkání pro omlazenou a pevnější pleť.

Fototerapie modrým LED světlem



Optimální rozsah modrého LED světla o 415 nm má antibakteriální vlastnosti a pomáhá redukovat tmavé kruhy pod očima a nerovnoměrnou pigmentaci pleti tím, že inhibuje nadměrnou produkci melaninu.

EMS (elektrická stimulace svalů)



Integraci jemných elektrických impulsů zajišťuje zvednutější a definovanější efekt. Je obzvláště účinný pro péči o oblast pod očima a zajišťuje jasnější a odpočatější vzhled.

Vestavěný časovač



Pokud se na zařízení po dobu 5 minut neprovede žádná aktivita, automaticky se vypne.

Terapeutické teplo



Toto příjemné teplo nejen pomáhá vstřebávat použité sérum (doporučujeme Flash Eye Serum od Sookskincare pro maximální efekt), ale také zmírňuje stres a únavu očí, což přispívá ke zdravějšímu vzhledu pokožky.

Jemná masáž



Tato funkce zlepšuje krevní oběh a pomáhá redukovat otoky a tmavé kruhy pod očima, čímž dodává svěžejší vzhled.

Otočná hlavice o 90°



Toto zařízení nejen maximalizuje účinnost ošetření, ale také nabízí pohodlí nastavení polohy, čímž zajišťuje ergonomický a uživatelsky příjemný zážitek z ošetření.

VLASTNOSTI PRODUKTU



Magnetické nabíjení



Inteligentní spínač




Otočná hlavice



Přepínací režim ošetření

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK

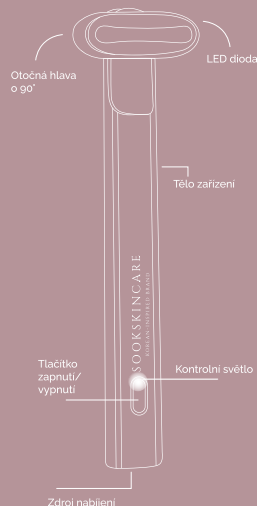

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Naneste přiměřené množství séra na ošetřovanou oblast, aby vaše pokožka zůstala hydratovaná.
2. Zapnutí: stiskněte a podržte tlačítko ZAP/VYP po dobu 3 sekund.

3. Jemně posouvejte masážní hlavici po pokožce od vnitřního koutku oka k vnějšímu a masírujte tak kontury očí.

4. Masážní hlavici můžete také otáčet.

5. Vypnutí: Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF po dobu 3 sekund.

6. Po použití očistěte masážní hlavici čistým hadříkem, vlhkým ručníkem (nebo alkoholovým tamponem). Neoplachujte ji vodou!

7. Pokud po zapnutí neprovedete žádnou operaci, zařízení se po 5 minutách automaticky vypne a přepne se do vypnutého stavu. Pokud potřebujete přístroj dále používat, restartujte jej.

NÁVOD K POUŽITÍ

Režim červeného světla (režim proti stárnutí):

Po aktivaci tohoto režimu se současně aktivuje funkce EMS, která způsobí „mravenčení“ na pokožce. Vzhledem k rozdílu v odporu lidského těla někteří lidé nepocítí mravenčení způsobené EMS, což je normální.

Režim modrého světla:

Tento režim nemá funkci EMS.

Přepínání režimů:

Během používání můžete přepínat režimy podle svých potřeb. Přepínání režimů je možné pomocí jednoduchého tlačítka.

NABÍJENÍ

1. Vložte USB konektor do 5V výstupní USB nabíjecí hlavy, nasměrujte magnetickou hlavu přímo k nabíjecímu zdroji na spodní straně zařízení a magnetické nabíjení se automaticky spustí.
2. Když kontrolka bliká nahoru a dolů, nabíjí se.
3. Když kontrolka svítí, baterie je plně nabitá.
4. Když nabití klesne pod 20 %, kontrolka tlačítka se rozsvítí červeně, což znamená, že je třeba zařízení nabít.
5. Kontrolka třikrát pomalu blikne, což je připomínka extrémního nedostatku energie a zařízení přestane fungovat.
6. Nabíjejte zařízení během provozu, automaticky se vypne a přejde do stavu nabíjení.
7. Nabíjecí kabel musí být udržován v dobrém stavu a nesmí se ztratit.

VAROVÁNÍ

1. Tento výrobek není vodotěsný. Neoplachujte jej vodou a neumísťujte jej do blízkosti vany, umyvadla nebo koupelnového dřezu, aby nedošlo k jeho pádu a poškození.
2. Baterii je nutné plně nabit alespoň jednou za tři měsíce; jinak by mohlo dojít k poškození baterie.

3. Během používání se masážní hlavice může otáčet pouze dopředu (po směru hodinových ručiček) s maximálním rozsahem otáčení 90°. Po použití ji můžete vrátit doleva.
3. Z důvodu zajištění čistoty a prevence infekčních kožních onemocnění tento produkt po použití vrátit.

POZNÁMKY

1. Pokud trpíte nějakým kožním onemocněním, poraďte se před použitím s dermatologem.
2. Při prvním použití vyzkoušejte na paži.
3. Pokud pocítíte jakékoli nepohodlí, okamžitě přerušete používání.
4. Z hygienických důvodů nesdílejte tento výrobek s jinými osobami. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí, abyste předešli nehodám.

Nepoužívejte chemikálie. Tento výrobek nerozebírejte, pokud nejste odborník.

PARAMETRY PRODUKTU (TABULKA)

MATERIÁL VÝROBKU	KOV • PC PLAST
KAPACITA BATERIE	350 mAh
NAPĚTÍ	5V
DOBA NABÍJENÍ	2 HODINY
ROZMĚRY VÝROBKU	150*13*11 mm
ČISTÁ HMOTNOST	29g
VÝKON	1.5W

DŮLEŽITÉ

Uživatelé produktu tak činí na vlastní nebezpečí. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za újmu na zdraví způsobenou přímo či nepřímo používáním produktů.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Záruka je dva roky od data zakoupení.
2. Záruka na výrobek se vztahuje na problémy, které vzniknou při běžném používání.
3. V rámci záruční doby a v daném rozsahu je poskytována bezplatná údržba.

VÝJIMKA ZE ZÁRUKY

1. Za kterékoli z následujících okolností, a to i během záruční doby, nebude záruka uznána, ale za opravu může být účtován poplatek:
 2. Poškození způsobené nedodržením pokynů v návodu k obsluze výrobku;
 3. Poškození způsobené nesprávným používáním, poškozením (například pádem, pádem do vody atd.) a násilnou manipulací, pádem, pádem do vody atd.) a násilnou manipulací;
4. Závady a poškození nezpůsobené specifikovaným skladovacím prostředím výrobku (např. příliš vysoká, příliš nízká teplota, vlhkost atd.).
5. Tato záruka se vztahuje pouze na případy, kdy spotřebitelé výrobek zakoupí a používají pro osobní spotřebu, nikoli pro komerční účely.

Pro více informací nás kontaktujte e-mailem na adrese:
info@beautytape.cz



© 2025 CUTISTECH GROUP S.L. All rights reserved. CUTISTECH GROUP S.L. owns trademarks, registered trademarks, patents, patents pending, design registrations and protection of the copyright of SOOKSKINCARE products. Compliant with regulations www.sookskincare.com Distributed by CUTISTECH GROUP S.L. EU: Carrer Bruc 27, local 1, 08010, Barcelona, Spain info@sookskincare.com